




 **YUNMAI**

Yunmai Extra Mini Masszázsgép MV-FG-M281

Felhasználói kézikönyv

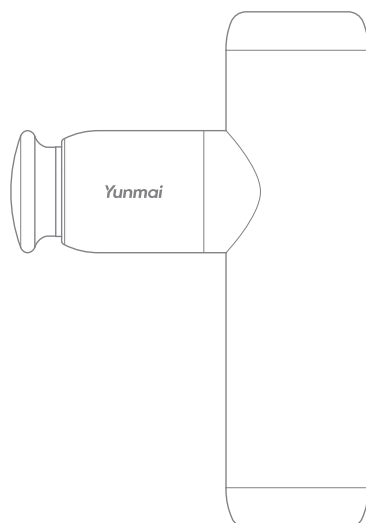

Biztonsági utasítások

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a használati utasításokat, és tartsa azokat jó állapotban.

Figyelmeztetés

- Tilos a termék használata a fej, az arc, a könyök, a térd és más ízületek, a gerinc és más csontos, kevésbé izmos részek körül.
- Tilos ezt a terméket az oldalsó, elülső és hátsó nyakcsigolyáknál használni, hogy elkerüljük a nyaki verőér károsodását, ami ájulást és szívmegállást okozhat.
- Tilos a terméket használni a hónaljban, a kar középső oldalán, a kulcscsont középső oldalán, a könyökízület középső oldalán, a térd hátsó részén lévő poplitealis fossa, a has, a vesetájék, a nemi szervek és más érzékeny részeken, ahol az idegek és erek sűrű hálózata található.
- A veseköves, húgyvezeték-, hólyag-, húgyúti kövek, húgyúti fertőzések és egyéb húgyúti megbetegedésekben szenvedő betegek nem használhatják ezt a terméket a hasüreg alatt.
- Ez a termék nem alkalmazható olyan testtájon, ahol zúzódás, fájdalom, felületi seb, helyi láz, duzzanat, kellemetlen érzés, akut gyulladás, izomgörcs, izomseb, akut rándulás, zúzódás és húzódás van.
- Ha intenzív testmozgás után láz, hányinger, hányás, izomfájdalom és gyengeség jelentkezik, ne használja ezt a terméket, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A következő betegségekben szenvedő betegek nem használhatják ezt a készítményt: szív- és érrendszeri és agyi betegségek, vérbetegségek, véralvadási zavarok, trombocitopéniás purpura, carotis plakk, visszérbetegség, vénás trombózis, daganatok, pszichiátriai betegségek.
- Töréssel vagy belső körömmel rendelkező betegek nem használhatják ezt a terméket.
- Tilos ezt a terméket precíziós műtétek végzése vagy vezetés közben használni.
- Ne használja ezt a terméket folyamatosan, hosszú ideig, hogy elkerülje a túlzott masszírozás okozta izomkárosodást.

A Yunmai masszírozó segíthet a testnek csökkenteni a fáradtságot, enyhíteni az izomfájdalmat és a kellemetlenségeket, és javíthatja a sportteljesítményt. Nem helyettesítheti azonban a professzionális orvosi berendezések funkcióját. Nincs hatása a fogyásra, nem gyógyít semmilyen betegséget, és nem oldja meg az orvosi problémákat. Nem jár kártérítés a saját betegsége vagy helytelen működése által okozott orvosi balesetekért.

Figyelmeztetések

- * Csak beltéri használatra!
- * A készüléket töltés közben jól szellőző helyen kell elhelyezni.
- * Az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.
- * Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék felügyelet nélküli tisztítását és karbantartását.
- * A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszzanak a készülékkel.
- * A terméket a gyár elhagyása előtt körülbelül 60%-80%-os töltöttségi szintre töltötték fel, és a kinyitás után töltés nélkül is használható.
- * A készülék működtetésekor a sérülések elkerülése érdekében ne tegye ujjait, haját vagy más testrészeit a masszázsfej és a készülék közötti érintkezés közelébe.
- * Ne blokkolja vagy helyezzen idegen tárgyakat a masszázsfej és a töltőcsatlakozó szerelési hornyába, különben rövidzárlat miatt égési sérüléseket, áramütést vagy tüzet okozhat.
- * Ne áztassa a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- * Ne használja ezt a terméket párás környezetben.
- * Kérjük, hogy a készüléket 0-40°C közötti hőmérsékleten használja és töltsse fel.
- * Tartsa a készüléket távol a víztől, tűztől és maró környezettől, hogy ne befolyásolja az akkumulátor teljesítményét.
- * Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa a terméket saját maga. Kérjük, csak a cégünk által biztosított eredeti töltőt használja.
- * Kérjük, ne használja a terméket töltés közben.
- * A töltés befejezése után kérjük, időben távolítsa el a töltőt a termékről.
- * Ha a terméket hosszabb ideig nem használta, kérjük, töltsse fel, mielőtt újra használná.

A balesetek elkerülése érdekében ezt a terméket nem használhatják 80 évnél idősebb személyek vagy kiskorúak. Ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll, a használat előtt konzultáljon orvosával, és csak orvosi engedéllyel alkalmazza.

Azok a személyek, akik nem használhatják a készüléket:


- Terhes és szülés utáni nők.
- 60 év feletti személyek.
- Rabdomiolízis-szindrómában szenvedő személyek.
- Végtagvesztéssel és/vagy magas fokú paraplegiával küzdő személyek.
- Pacemakerrel és stenttel rendelkező személyek.
- Olyan alanyok, akik 12 hónapon belül műtéten estek át.
- Ortopédiai betegségekben szenvedő személyek, például gerinc-, ízületi és csontbetegségek, csonttritkulás, nyaki spondilózis, ágyéki porckorongsérv és mások.

- Betegség és/vagy életkor miatt csökkent végtag-érzékelésű és mozgáskorlátozott személyek.
- Olyan alanyok, akiknél a szervezet más betegségei, például neuropátia vagy retinakárosodás miatt szövődmények jelentkeznek.
- Veseköves, húgyvezeték- és hólyagköves, húgyúti kövek, húgyúti fertőzések és a húgyúti rendszer egyéb betegségei esetén.

Rendellenességek és hibák esetén:


- Kerülje a termék ütögetését, rázását vagy ütögetését. Az erős ütések károsíthatják a készülék alkatrészeit, és meghibásodáshoz vezethetnek. Ha a fenti helyzet bekövetkezik, forduljon időben az értékesítés utáni szervizközponthoz.
- A termék tartós használata a készülék felületi hőmérsékletének emelkedését és károsodását okozhatja. Ne használja hosszú ideig.
- Ha hőt, füstöt, túlzott zúgást érez a készülékből, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és a megfelelő megoldás érdekében forduljon a kereskedőhöz.
- Ha a készülék használata közben az akkumulátor magas hőmérsékletét, deformálódását, tágulását vagy szivárgását tapasztalja, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a kereskedőhöz.

Termékleírás

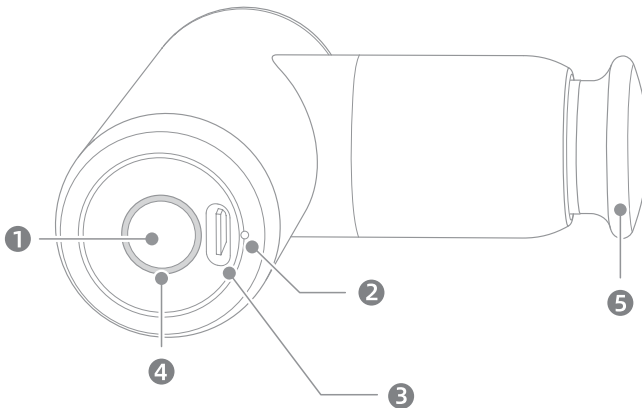

1. Bekapcsológomb (üzemmódválasztó és be-/kikapcsoló)
 2. Teljesítményjelző lámpa
 3. Töltő interfész
 4. üzemmódjelző lámpa (villogó)
- Masszázsfej (szilikonfej felszerelhető)


Tartozékok

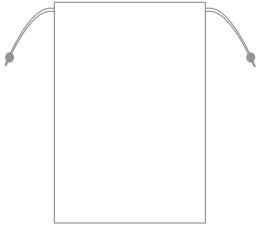

Tároló táska




Használati utasítás

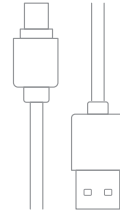


Töltőkábel




Kerek fej

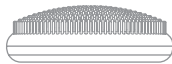

Lapos fej

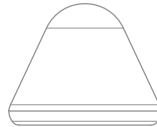

Gomba alakú fej

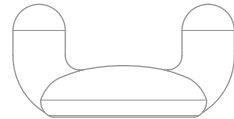

U alakú fej

Masszázs funkciók

- * Az edzés utáni késleltetett izomfájdalom enyhítése és a feszült izmok ellazítása.
- * A mozgásszegény életmód és a rossz testtartás okozta fájdalom és merevség enyhítése a hát- és vállizmokban.
- * Napi masszázsa a test ellazítására.

Szilikon masszázsfjek

- * Kerek fej: puha és rugalmas, alkalmas a legtöbb testizom masszírozására.
- * Gomba alakú fej: mélyebb és erősebb, alkalmas a mély szövetek és a helyileg fájló izmok, például a kezek, talpak és lábszárak kezelésére.

- * U alakú fej: alkalmas a gerinc és a váll mindkét oldalán lévő izmok kezelésére.
- * Lapos fej: alkalmas a legtöbb testizomhoz.

Útvonalterv

A jelen kézikönyvben szereplő termék-, tartozék- és felhasználói felület ábrák csak szemléltető ábrák. A termékfrissítések miatt a tényleges termék és az ábra között eltérések lehetnek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

Intelligens védelem

A készülék intelligens védelmi funkcióval van felszerelve. A hosszan tartó masszázs okozta izomsérülések elkerülése érdekében az üzemmódjelző lámpa 10 perc folyamatos működés után kialszik, a teljesítményjelző lámpa pedig világít. Nyomja meg a bekapcsológombot az első fokozat bekapcsolásához 5 másodpercen belül az idő újbóli beállításához. Ha nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan kikapcsol.


A blokkolt rotor védelme


A készülék el van látva a rotor blokkolása elleni védelmi funkcióval. Ha a blokkolt rotor állapota 3 másodpercnél tovább tart, a készülék készenléti üzemmódba kerül. Kattintson a bekapcsológombra, hogy 10 másodperc elteltével újra bekapcsolja a készüléket. Ha nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan kikapcsol.

Telepítés

A masszírozó saját masszázsfejjel (lapos fejjel) rendelkezik, amelyek igény szerint önállóan vagy kombinálva is használhatók.

A telepítés módja a következő:

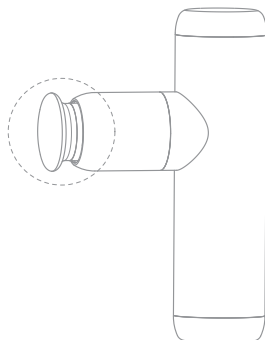

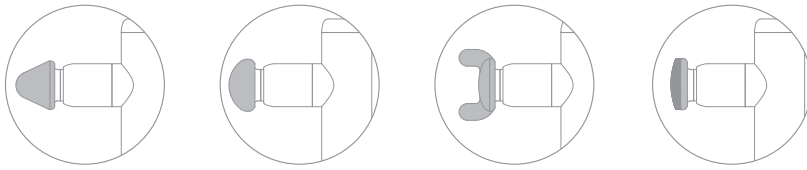


Figyelmeztetés

A masszázsfejet ki- és bekapcsolt állapotban kell felszerelni, illetve leszerelni, és a készülék beindítása előtt meg kell győződni arról, hogy a fej biztonságosan fel van-e szerelve. A masszázsfaj használatakor nem szabad beállítani vagy terhelni, hogy elkerülje a masszázsfaj sérülését.

Használja a címet.

1. Jelzőlámpa

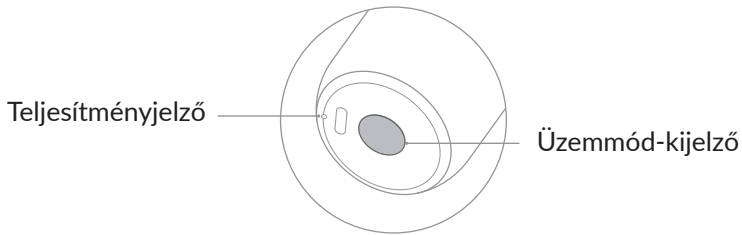


Módjelző (üzemmódváltás)

A bekapcsolás után kattintson újra a bekapcsológombra, hogy a masszírozó üzemmód-jait egyenként megváltoztassa.

Üzemi szint	Üzem mód-kijelző	Névleges sebesség (RPM)	Funkció
Mód 1	Kék villogás	1500	Izomstimuláció
Mód 2	Villogó zöld	2400	Relaxáló masszázs
Mód 3	Vörös villogás	3200	Mély masszázs
Mód 4	Villogó sárga	650	Gyengéd masszázs
Készenléti üzemmód (2s után kikapcsol)		0	

2. Bekapcsológomb

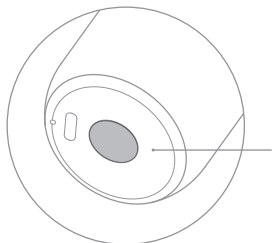


Bekapcsoló gomb (bekapcsoló/üzemmód kapcsoló)

- * Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- * A bekapcsolás után a bekapcsológomb egyetlen kattintása megváltoztatja az üzemmódot.

Figyelem

A készülék elindítása után ajánlott 5 másodpercet várni, mielőtt az izmokra alkalmazná. Ne használja a készüléket töltés közben!

3. Töltés

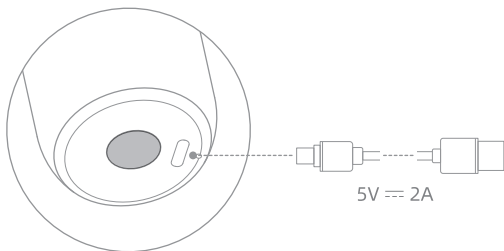

A töltőnyílás a masszírozó fogantyújának alján található. Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőportba, és a töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a hálózati adaptert.

Teljesítményjelző (töltésjelző).

- * Ha a piros lámpa világít, a készülék töltődik.
- * A masszírozó teljesen feltöltött, ha a zöld fény világít.

Vigyázat

Ne használja a masszírozót töltés közben!

4. Alkalmazás

- Válassza ki a megfelelő masszázsfejét, kapcsolja be a masszírozót, majd az igényeinek megfelelően változtathatja az üzemmódot. Javasoljuk, hogy a készüléket a legalacsonyabb üzemmódban próbálja ki.
- Óvatosan nyomja a masszázsfejét az ellazítandó izomrészre, és lassan mozgassa előre-hátra. Ha van egy további fájdalmas rész a területen, gyakoroljon megfelelő nyomást az érzékeny területre, és hagyja ott 15-30 másodpercig.
- A masszírozó maga is ütőerővel rendelkezik, ezért ne alkalmazzon túlzott erőt a nyomás kifejtésekor, hogy ne sérüljenek az izmok és a csontok.
- Ajánlott azon a részen használni, ahol több izom van. Ne maradjon 60 másodpercnél tovább ugyanazon a részen.
- Az ajánlott időtartam 10 perc. Ha még mindig fájdalmat érez, növelje a masszázs idejét ennek megfelelően.
- Ajánlott, hogy az egyszeri használat időtartama ne haladja meg a 15 percet, a folyamatos használat időtartama pedig a 30 percet.
- A terméket a masszázsra vonatkozó utasításoknak megfelelően használja.

Alapvető paraméterek

Termék neve: Yunmai Massager Extra Mini

Termékmodell: MVFG-M281

Nettó súly: 240g

Akkumulátor kapacitás: 1300mAh

Névleges bemenet : 5V=2A

Teljesítményszint: négy üzemmód

Energia üzemmód: újratölthető lítium akkumulátor

A termék méretei: 88 x 35 x 126,6 mm

Felhasználói életkor: 18 év feletti felnőttek számára; terhes nők nem használhatják a készüléket.

Karbantartás

1. Tisztítás

- A készülék testét és a masszázsfejeket rendszeresen törölje át tiszta és enyhén nedves puha ruhával vagy nedves törülközővel; szárítsa meg őket száraz ruhával vagy papírtörülkövel, majd tegye őket egy tároló zsákba.
- Ne használjon mosóvizet, és ne tegye ki a masszázsfejeket a napnak.
- Tisztításkor győződjön meg arról, hogy a bekapcsológomb ki van kapcsolva, és a töltőcsatlakozót kihúzta.
- Ne használjon maró oldatokat a készüléktest tisztításához. Ennek elmulasztása a termék meghibásodását vagy repedezését és elszíneződését eredményezheti.

2. Tárolás

- A terméket hűvös és száraz helyen tárolja.
- Ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol a magas hőmérséklet meghaladja a 40°C-ot, az alacsony hőmérséklet pedig -5°C alatt van. Tárolja a készüléket nedvességtől, víztől, tűztől és korrodáló környezettől távol, hogy az akkumulátor teljesítménye ne sérüljön.
- Ha a masszírozót tárolni vagy mozgatni kell, a mellékelt táskában tárolhatja.
- Ne érintse meg, ne nyomja össze, ne ejtse le, ne dobja el és ne karcolja meg a terméket.
- A termék alkalmas autóval, vonattal, hajóval, repülővel stb. történő szállításra. Szállítás közben a terméket biztonságosan rögzíteni kell.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használta, töltsse fel, mielőtt újra használná.
- Ha a használat során az akkumulátor magas hőmérséklete, deformálódása, tágulása és szivárgása jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon a kerekedőhöz.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy a termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserin;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása