


LIBEREK

Instrukcja obsługi

Irygator do płukania jamy ustnej

Model: FC 2660

Opis produktu

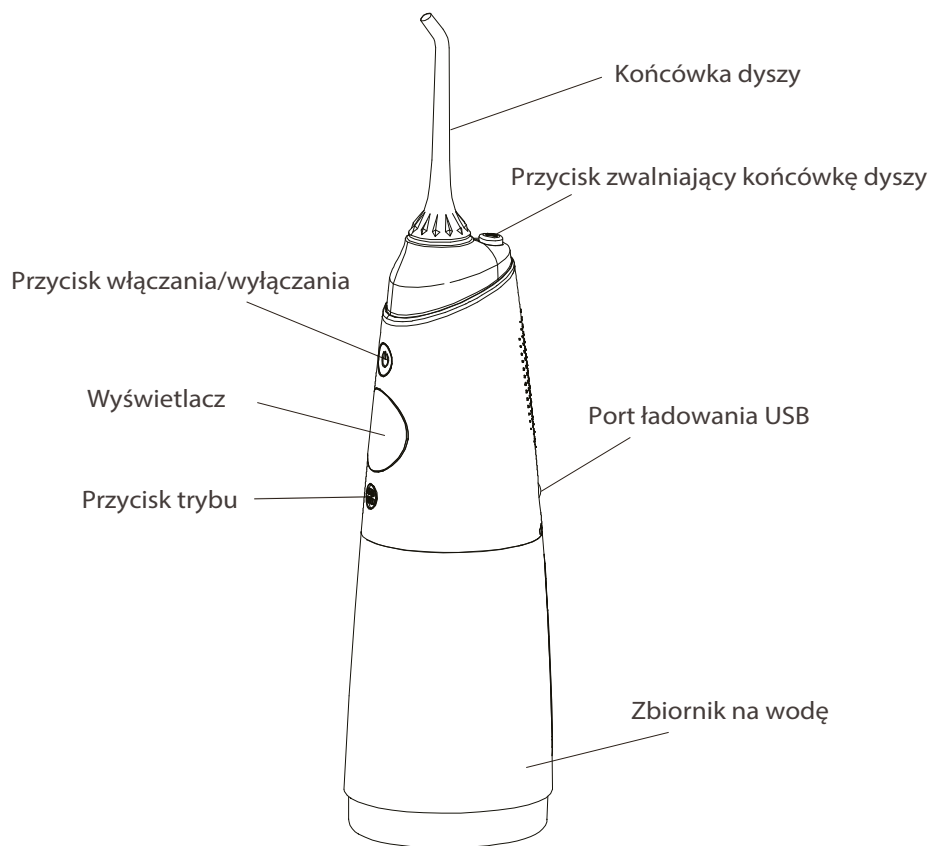

Akcesoria




Dysza x5



Kabel ładujący x1


Instrukcja obsługi

Proszę upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
Nie używaj go podczas ładowania.

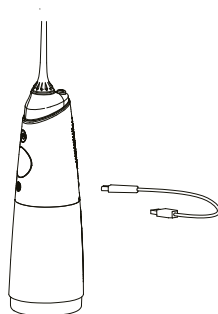


Montaż i demontaż końcówki dyszy


Nacisnij przycisk zwalniający i włóż dyszę do głowicy opryskującej.
Przytrzymaj aż do usłyszenia "kliknięcia" pierścienia.

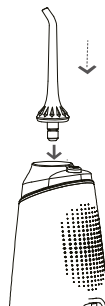

Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, a następnie napełnij go wodą.
Uwaga: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

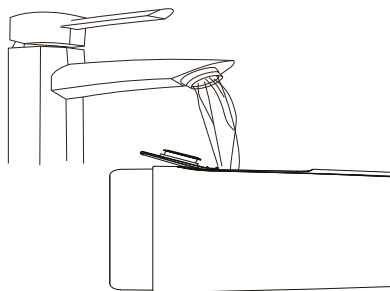

Po użyciu należy nacisnąć przycisk zwalniający i odłożyć dyszę.

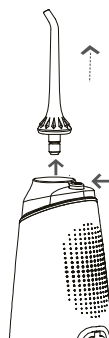


Etapy obsługi

1. Naciśnij przycisk trybu w sposób ciągły, tryb przetacza się w sekwencji: wysoki-średni-niski-pulsujący. Urządzenie posiada funkcję pamięci. W stanie wyłączenia, można również wybrać odpowiedni dla użytkownika tryb, a następnie włączyć urządzenie ponownie.
2. Niezależnie od trybu pracy, po upływie 120 sekund produkt wyłączy się automatycznie.
3. W przypadku braku zasilania, wskaźnik świetlny będzie się świecił na czerwono, aż do momentu włączenia zasilania. Podczas ładowania produkt nie może być używany.
4. Ładowarka jest odpowiednia dla: AC 100-240VAC, 50/60Hz, wyjście 5V 1A.
5. Trzymaj urządzenie w pionie, aby uzyskać najlepszy efekt, obróć pokrętło końcówki strumienia w celu dostosowania kierunku przepływu wody.
6. Krwawienie z dziąseł jest normalnym zjawiskiem przy pierwszym użyciu. Zaleca się rozpocząć od niższego poziomu ciśnienia.




Polecane techniki

Trzymając urządzenie w pozycji skierowanej ku dołowi, należy skierować końcówkę strumienia na zęby, obracając podstawę końcówki przed włączeniem urządzenia.

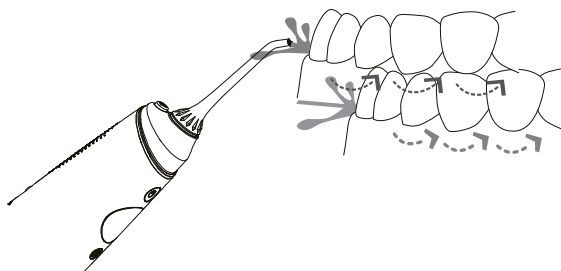


Gdy strumień wody i dżiąsła znajdują się pod kątem 90 stopni, zamknij lekko usta, aby uniknąć rozpryskiwania wody. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów proszę zacząć od obszaru zębów trzonowych aż do siekaczy. Przesuwaj strumień wody wzdłuż dżiąseł, a także pozostaw strumień na chwilę między zębami, aż do momentu, gdy obszar wokół dżiąseł i przestrzeń między zębami są całkowicie oczyszczone.

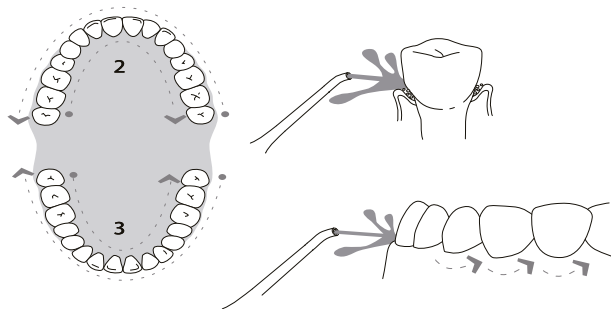


Przykład demontażu

Po użyciu

Proszę wyłączyć zasilanie i opróżnić zbiornik na wodę.

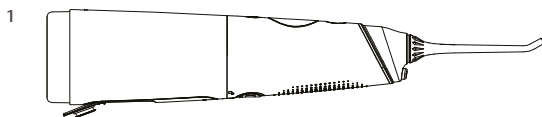

Używając rąk w sposób wskazany na ilustracji 2, użyj lewej ręki do trzymania korpusu produktu, a prawą ręką przytrzymaj zbiornik na wodę. W tym samym czasie obracaj urządzenie w dół w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w celu wyjęcia zbiornika na wodę.

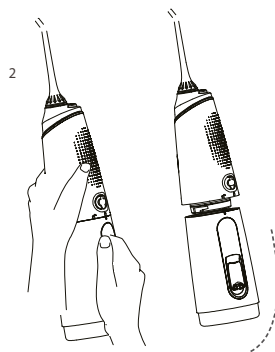

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>

Konserwacja i przechowywanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być w pełni naładowane, co trwa około 4 godziny. Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy okres czasu, należy je wcześniej w pełni naładować. W celu maksymalnego wydłużenia czasu użytkowania akumulatora, prosimy o niezwłoczne ładowanie, gdy moc jest niewystarczająca.

Urządzenie zawiera akumulator litowy, którego nie można wymieniać. Po zakończeniu okresu użytkowania akumulatora, należy oddać go do utylizacji w lokalnym centrum recyklingu.

Ważne zabezpieczenia

Podczas korzystania z produktów elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.

NIEBEZPIECZEŃSTWA:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Nie należy obsługiwać ładowarki mokrymi rękami.
2. Nie należy zanurzać ładowarki w wodzie lub innej cieczy.
3. Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód ładowarki nie jest uszkodzony.
4. Ładowarkę i przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
5. Należy używać tego produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji lub zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa.
6. Nie należy sięgać po produkt, który wpadł do wody. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
7. Nie należy podłączać urządzenia do sieci o napięciu innym niż określony zakres napięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, poważnych obrażeń lub uszkodzeń:

1. Nie używaj produktu, jeśli masz uraz na języku lub w jamie ustnej.
2. Jeśli jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego, powinieneś skonsultować się z dentystą przed użyciem tego urządzenia.
3. Nie kieruj wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych organów.
4. Krwawienie dziąseł jest normalnym zjawiskiem przy pierwszym użyciu. Zaleca się rozpoczęcie od niższego poziomu ciśnienia.
5. Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci lub inwalidów.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Przeciek wody między końcówką dyszy, a częścią śrubową.	1. Końcówka nie może zostać prawidłowo zainstalowana. 2. Pierścień uszczelniający końcówkę dyszy jest uszkodzony.	1. Włóż końcówkę dyszy w część śrubową do momentu usłyszenia kliknięcia. 2. Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy i prawidłowego zainstalowania końcówki dyszy.
Nieodpowiednie ciśnienie	Pierścień uszczelniający jest luźny lub uszkodzony	Wymień pierścień uszczelniający
Nieodpowiednie ciśnienie	Użycie niskiego napięcia	Użyj po naładowaniu
Urządzenie nie może zostać włączone	Użycie niskiego napięcia	Użyj po naładowaniu
Urządzenie nie natryskuje wody	Siatka filtracyjna jest zatkana	Zwilż i oczyść siatkę filtracyjną
Boki zbiornika wody przeciekają	Otwór wlotowy powietrza wytwarza wodę	Zjawisko standardowe zasada wysokiego ciśnienia powietrza

Jeśli powyższe metody nie rozwiążą tych problemów, należy skonsultować się ze sprzedawcą lub udać się do wyznaczonego punktu napraw.

LIBEREX