




Masażer YUNMAI Prime

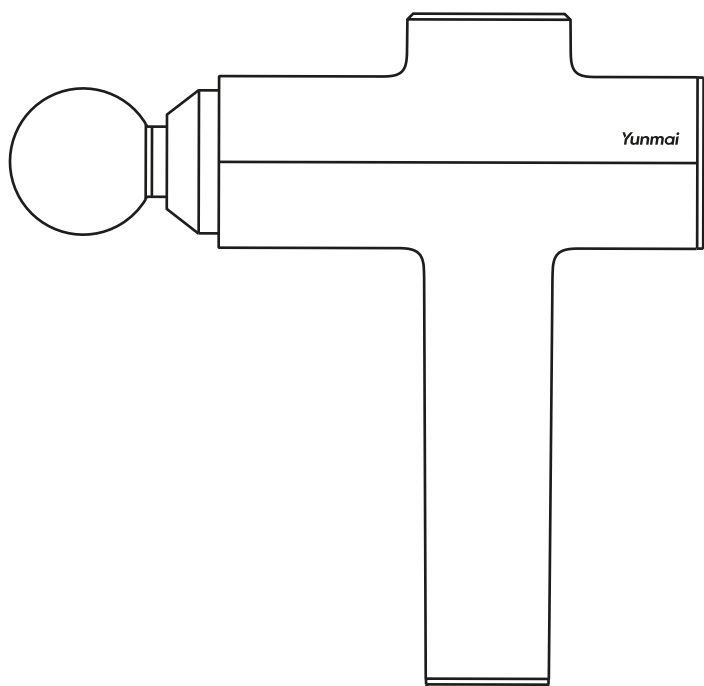

Instrukcja
obsługi

Kluczowe informacje

Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, śmierci i uszkodzenia sprzętu, przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie stwierdzenia i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.

Zakazy

- Używanie tego produktu przez osoby niepełnoletnie i z urazami jest surowo zabronione. W przypadku urazu mięśni, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używaj tego produktu na mokrej lub brudnej skórze. Ten produkt może być stosowany przez ubranie. Użytkownicy mogą delikatnie naciskać ten produkt na skórę, przesuwać go wzdłuż różnych partii mięśni, pozostawiając je w jednym miejscu przez około 60 sekund.
- Nie należy używać tego produktu na częściach ciała powyżej szyi, ani na częściach ciała o mniejszej zawartości mięśni lub kości. Ten produkt może być stosowany tylko na tkankach miękkich, gdy użytkownik nie odczuwa bólu lub reakcji niepożądaney.
- Nie należy używać tego produktu na częściach ciała z siniakami, bólem lub niepożądaną reakcją.
- Nie należy umieszczać obcych przedmiotów w otworze wentylacyjnym produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie. Nie dopuścić, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych produktu.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ognia.
- Nie rzucać ani nie upuszczać celowo produktu.
- nie ładować produktu za pomocą ładowarek innych, niż dostarczone przez YUNMAI.
- Nie należy demontować produktu.
- Palce, włosy lub inne części ciała mogą zostać uwięzione w trzonie i tylnej stronie głowicy masującej. Nie należy wchodzić w bliski kontakt z tymi obszarami.
- Nie dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieciom nie wolno używać, czyścić i konserwować produktu bez nadzoru.

Oświadczenie

Osoby mające którąkolwiek z poniższych okoliczności powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

- Kobiety w ciąży
- Osoby noszące rozrusznik serca
- Przeszły niedawno operację
- Nieprawidłowości w obrębie kręgosłupa, stawów lub kości
- Komplikacje spowodowane innymi chorobami (takie jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki)

Obecne badania skupiają się na wpływie treningu wibracyjnego na specjalne warunki medyczne i mogą zmniejszyć zakres wyżej wymienionych przeciwwskazań.

Doświadczenie praktyczne pokazuje, że połączenie leczenia i treningu wibracyjnego służy również w wielu okolicznościach jako rodzaj terapii. Takie podejście powinno być jednak zalecane przez lekarzy, specjalistów lub terapeutów lub prowadzone w ich obecności.

Środki ostrożności

- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od prądu.
- Nie należy używać produktu, gdy jest on naładowany.
- Proszę używać produktu zgodnie z instrukcją.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy produkt może być używany normalnie, zgodnie z metodami działania określonymi w instrukcji.




Nie dotykaj tej części, aby uniknąć szczypania, gdy urządzenie jest włączone bez zainstalowanej główicy masującej.



Nie dotykaj tej części, aby uniknąć szczypania, gdy urządzenie jest włączone z zainstalowaną główicą masującą.

Informacje o produkcie

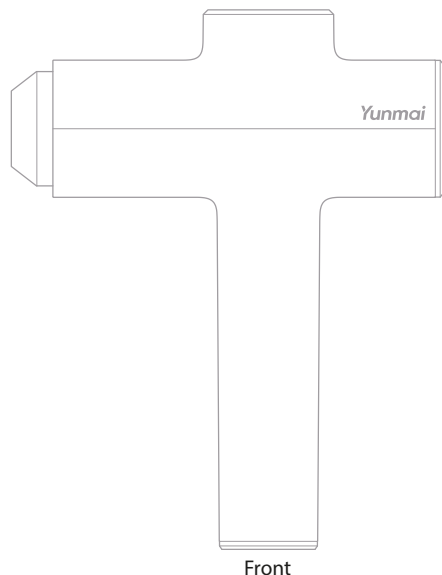

Front




Wskaźniki prędkości

Przycisk zmiany


Wskaźniki zasilania

Bok

Głowica masażera

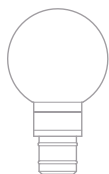

Głowica kula
zalecana do masowania
większych grup mięśni

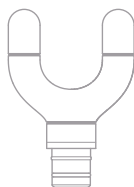

Głowica ukształtna
Zalecana do masażu szyi, obu stron
kręgosłupa oraz ścięgna achillesa




Płaska głowica
zalecana do rozluźnienia
i kształtowania mięśni




Głowica w kształcie pocisku
Zalecana do działania
na głębokich tkankach

Użytkowanie

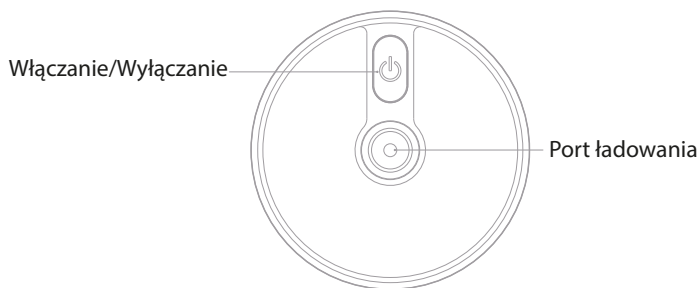

Przycisk Włączania/Wyłączania

- * Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aż do włączenia się diod „Zasilanie” i „Tryb”. Masażer uruchomi się w trybie Standard 1
- * Naciśnij przycisk włączenia wyłączenia, aby wyłączyć masażer

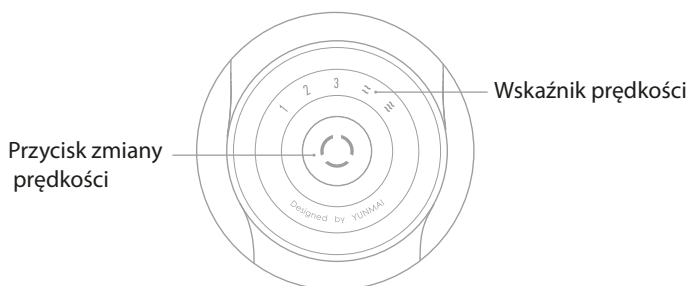


Wskaźniki prędkości

- * 3 prędkości dla trybu standardowego, 2 prędkości dla trybu masażu

Przycisk prędkości

- * Po uruchomieniu urządzenia, przejdzie ono w tryb Standard 1. Aby zmienić tryb należy krótko nacisnąć przycisk zmiany prędkości. Masażer przejdzie w tryb Oczekiwania, po naciśnięciu przycisku zmiany prędkości w trybie Masażu 2.

- * - W trybie czuwania, pistolet masujący wyłączy się bez działania przez 15 sekund.
- * - Pistolet do masażu wejdzie w tryb inteligentnego zabezpieczenia przed wyłączeniem zasilania po ciągłym użytkowaniu przez 10 minut. Ponownie uruchomić pistolet masujący, jeśli trzeba go użyć.

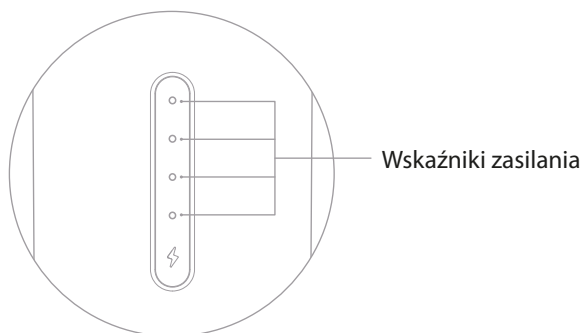


Wskaźniki zasilania

- * Gdy wszystkie lampki kontrolne są włączone, moc baterii wynosi 100%.
- * Gdy świecą się trzy lampki kontrolne, moc baterii wynosi 65%-80%.
- * Gdy świecą się dwie lampki kontrolne, moc baterii wynosi 40%-60%.
- * Gdy świeci jedna lampka kontrolna, moc baterii wynosi 20%-35%.
- * Gdy miga jedna lampka kontrolna, bateria jest słaba i wymaga natychmiastowego naładowania.
- * (Gdy urządzenie jest ładowane, cztery lampki wskaźnikowe migają regularnie; jeśli cztery lampki pozostają włączone stale, urządzenie jest w pełni naładowane).

Uwaga:

Po włączeniu trybu masażu prędkość silnika zmienia się sinusoidalnie, co może generować normalne zjawisko przyspieszania i zwalniania dźwięku wiatru.


Montaż głowicy masującej

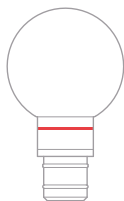


Głowica
kula



Głowica w kształcie
pocisku

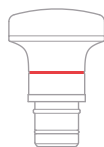

Płaska
głowica

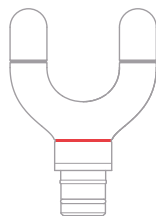


Głowica
ukształtna

Uwagi:


Czerwona linia ciągła na rysunku to linia do wyrównania, która w rzeczywistym produkcie jest jasno czarna.

Podczas montażu lub wymiany głowicy masującej należy włożyć głowicę masującą bezpośrednio do slotu głowicy masażera, aż linia wyrównania zbiegnie się ze slotem (jak pokazano na rysunku); podczas wymiany głowicy masującej należy wyciągnąć głowicę masującą bezpośrednio.

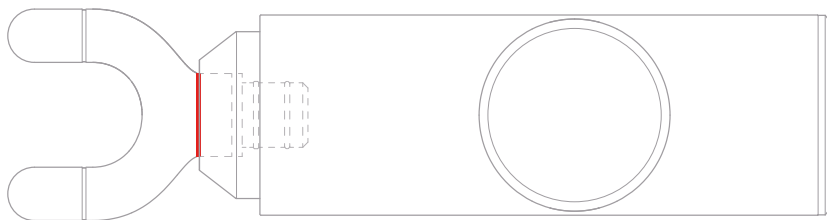

Ładowanie


The charging port is located at the bottom of the massage gun handle.

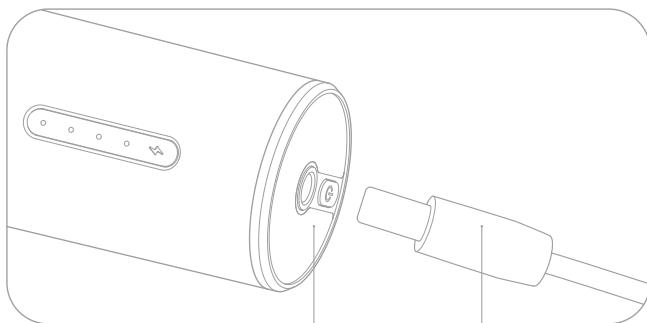

Port ładowania Kabel ładowania


- Proszę w pełni naładować pistolet do masażu przed użyciem go po raz pierwszy.
- Napięcie wejściowe dla tej ładowarki wynosi 100-240V.
- Kiedy masażer jest ładowany, wskaźnik zasilania miga regularnie.
- Kiedy masażer jest w pełni naładowany, wskaźniki zasilania są włączone.
- Akumulator może być ładowany w dowolnym czasie i przy dowolnym poziomie mocy. Podczas ładowania nie można uruchomić produktu.
- Jeśli świeci się tylko jedna kontrolka, oznacza to, że bateria jest niska, proszę naładować.

Akcesoria

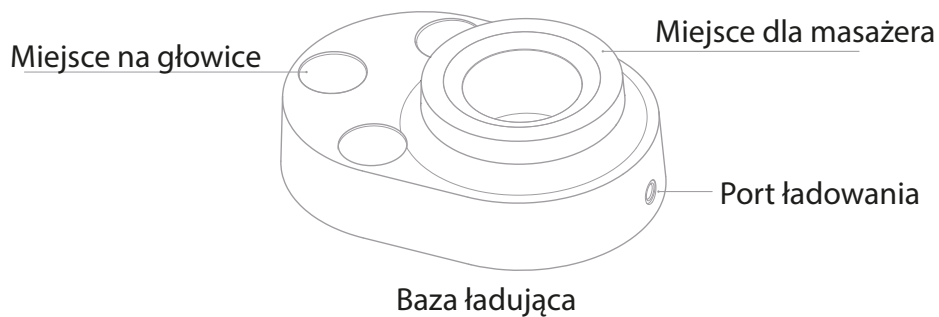


Wskazówki


1. Port ładowania znajduje się w dolnej części uchwyty pistoletu do masażu.

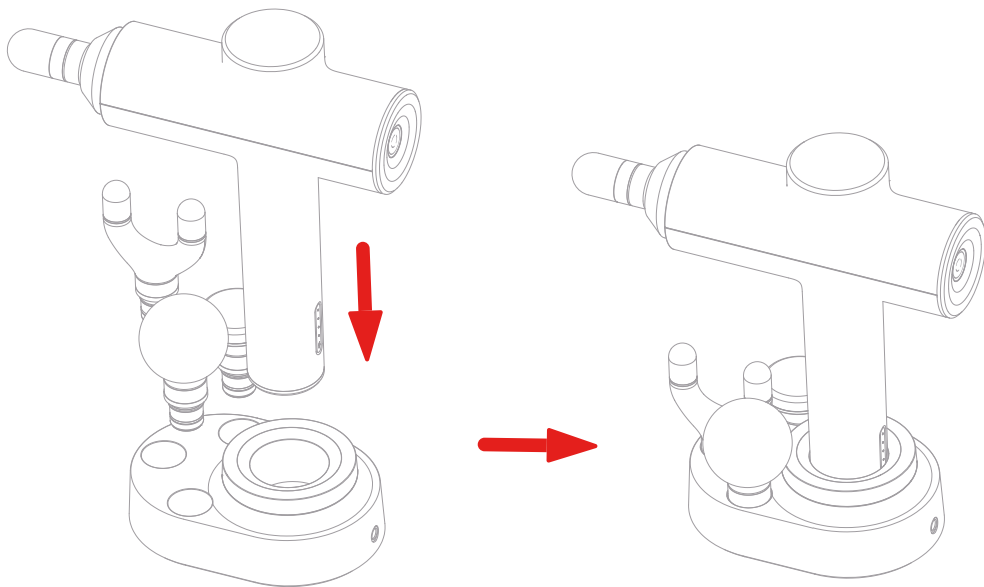

2. Podłącz kabel ładujący do bazy ładującej w celu naładowania masażera.

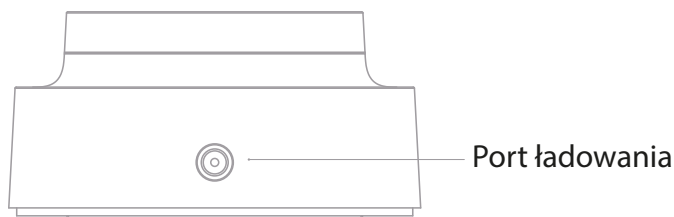

Instrukcja usuwalnego żelu

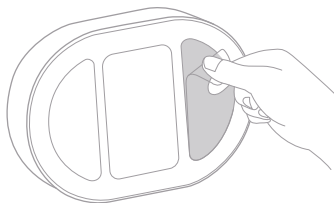

Pod bazą ładującą znajdują się dwa żele. Użytkownik może usunąć znajdujący się na nich plastikową ochronę i przykleić bazę ładującą do czystej powierzchni (Żel jest wyjmowany, można go umyć i używać wielokrotnie).

Uwaga:

Nie należy umieszczać bazy ładującej na krawędzi, aby zapobiec upadkowi i uszkodzeniu masażera.

Nie umieszczaj bazy ładującej na zakurzonej powierzchni, w przeciwnym razie zostanie naruszona trwałość żelu.

Wyczyść żel do wyjmowania

- Gdy żel nie jest lepki, można przetrzeć go z odrobiną wody i wysuszyć w cieniu .
- Nie wycierać go z papierem, ręcznikiem lub innym przedmiotem, które są łatwe do upuszczenia okruchu .
- Nie należy myć podstawy ładowania, aby uniknąć zwarcia.

Parametry podstawowe

Nazwa: YUNMAI Massage Gun Prime

Typ :YM FG-B453

Waga netto: 0.84kg

Wejście: 100-240V~60/50Hz 19V:-: 1A e-(.... e

Biegi intensywności: 5 biegów do regulacji

Pojemność baterii: 2900mAh

Czas ładowania: Około 4h

Rozmiar: 179 x 60 x 236mm

Temperatura otoczenia: 0~40° C

Tryb zasilania: Ładowalna bateria Li-ion

Stosowany wiek: Dorośli powyżej 18 roku życia (z wyjątkiem kobiet w ciąży)

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem pistoletu do masażu	
Opis usterki	Rozwiązanie problemu
Główica masująca wysuwa się lub wypada	Sprawdź czy główka jest właściwie zamontowana
Produkt nie uruchamia się	Check whether the power is sufficient (if the product The product cannot be started has not been used for a long time, please charge it for more than 8 hours)
Produktu nie można naładować	Sprawdź czy przewód zasilający i baza ładująca są właściwie podłączone
Po 10 minutach używania produkt nagle się zatrzymał	Sprawdź czy przewód zasilający i baza ładująca są właściwie podłączone
Produkt przestaje działać po napotkaniu przez głowicę masującą zjawiska blokady wirnika	To zjawisko jest normalne, ponieważ jest spowodowane ustawieniem zabezpieczenia przed nieprawidłowym działaniem, które przełącza się z trybu pracy na tryb gotowości. A produkt można ponownie uruchomić poprzez krótkie naciśnięcie.

Rozsądne korzystanie z produktu może skutecznie przedłużyć jego żywotność

Zalecenia:

- Nie rzucaj ani nie zamocz w wodzie produktu podczas użytkowania.
- Utrzymuj maksymalny czas ciągłej pracy niższy niż 30 minut.
- Proszę ładować produkt co drugi miesiąc, jeśli nie jest używany przez długi czas.

Uwaga:

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 5 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem
- Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

- * Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

- * Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>